



**UPUTE ZA UPORABU**

Implantati, uporista i prirodne komponente restorativnog i zubnog laboratorija. Za detaljnije informacije o specifičnom sustavu proizvoda koji koristite, molimo pogledajte katalog Adin Dental Implant Systems Ltd.

**OPIS**  
Adin sustav zubnih implantata uključuje razne implantate proizvedene od titan-a.

Zubni implantati kurirski seume u gornji i / ili donju vilici u služi ke nadomestak ili zamjeni korijen zuba pružajući stabilne temelje za restauraciju.

**INDIKACIJE ZA UPORABU**

Adin implantati predviđeni su za uporabu u mandibula i maksilama dlejoni i poluprekozna zuba, kao potroška za restauraciju jedne ili više jedinica, uključujući učvršćivanje cementom, pružanje vijoma ili restoraciju nasadnih proteza, te terminalnu ili intermedijarnu potporu za ugradnju mostova. Uske platforme za implantate (UNP i NP) nazačene su za uporabu samo na srednjim i bočnim uještjivima. Dugoplanski implantati Adin (20, 22, 25 mm) učvršćeni su uporabu samo u situacijama koje anatomski dopušta takvu dužinu. Dugi implantati dizajnirani su da omoguću kuririzma da iskoriste ovu mogućnost dugoagnutu implantatu, koji se mogu kombinirati s dvokortikalnim sidrištem.

**UPUTE ZA UPORABU**

Postupak implantacije treba izvesti u aseptičnim uvjetima s posebno davanjem stoljnici kurirskim instrumentima, za bušenje kurirskog mesta preporučuje se električni kurirski sustav za bušenje s unutarnjim i vanjskim navodnjavanjem. Potrebno je slijediti posebne sekvenke bušenja za postavljanje implantata.

**UPZOORENJA**

Nepravana tehnika može pridonjeti neuspjehu implantacije i / ili grubosti kosti. Adin zubni implantati namijenjeni su samo za uporabu u navedenim aplikacijama. Zubni implantati ne smiju se na koj način mijenjati.

Upotreba elektrokurirskih instrumenata ili lasera oko metalnih implantata i njihovih nivoja nije preporučljiva zbog rizika od električne i / ili toplinske dodirivosti. Mobilitet implantata, gubitak kosti ili kronična infekcija mogu ukazivati na neuspjeh implantacije.

Ako se implantat na bilo koji način kontaminira pacijentovim tjelesnim izlučinama, implantat se ne može upotrijebiti ni na kojem drugom pacijentu.

**MJERE OPREZA**

Korišteni nečistoći i nesternili uređaji mogu predstavljati biološku opasnost zbog onečišćenja tkiva. Da biste sprečili rizike povezane s taksom opasnostima, izbjegavajte dodjelu u skladu s važećim lokalnim zakonima i propisima ili prema protokolu institucije. Kurirski tehnički potrebiti za postavljanje endosnih zubnih implantata zahtijevaju specijalizirane i složene postupke. Preporučuje se formalni trening za ugradnju implantata. Važno; utvrdo lokalnu anatomiju i prikladnost kosti na koju se postavlja implantat. Prije tretnjana, planiranja i izradbe Adin implantata, potrebno su odgovarajući radiografski snimci, izraziva pažnja i izuzimanje pregleđi mjesto implantacije.

Dugi implantati (20, 22, 25 mm), smješteni u maksilu, indicirani su samo za vrste restoracije u immobilizirajućim aplikacijama koje koriste najmanje dva implantata. Za konštruiranje dugih implantata tvrtke Adin, posebnu pozornost treba posvetiti dovoljnom volumenu kosti i kritičnim strukturama poput živaca, žila i sinusa.

**NEPOVOLJNE REAKCIJE**

Neke od komplikacija koje se mogu pojaviti uključuju: infekciju, gubitak kosti, nelagodnost pacijenta, pokretljivost implantata, lokalnu degeneraciju mješkavica i nepovoljni postavljanje ili povravljavanje implantata. Dodatne informacije o korici koje treba poduzeti mogu se pronaći u Korisničkom priučniku.

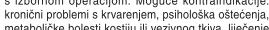
**KONTRAINDIKACIJE**  
Treba ueti u obzir opće kontraindikacije povezane s izborom operacije. Moguće kontraindikacije: kronični problemi s krvarenjem, psihoslova, oštećenje, metaboličke bolesti kostiju ili vezivnog tkiva, liječenje kortikosteroidima, određene bolesti krv i krvoljubog sustava, uporaba duhana, dijabetes (nekontroliran), liječenje xantoperapskim sredstvima, kreditački bolести, bubrežna, iščašna, higijenska, alkoholizam. Privenrene kontraindikacije: sistemska infekcija, lokalna orala i respiratorna infekcija. Anatomski ili patološke kontraindikacije: nedovoljna kvaliteta i volumen kosti, bušenje u jeziku, za nadređeni aspekt tijela implantata, neadekvatna vlasna kostna putanja, korištenje mališina i životinja, te neadekvatni aspekt tijela implantata, neadekvatna vlasna kostna putanja, korištenje mališina i životinja. Dugoplanski implantati ili NP kontraindikirane su za uporabu u nadoladni molarni, premolarini i očnjaku. Kako SE ISPORUČUJE

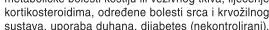
Ovak paket sadrži jedan zubni implantat. Uz sve dvodijelne implantate isporučuje se pokrovni vijak.

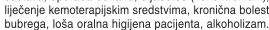
**OPREZ**  
Savjeti zakon (u SAD-u) ogranicava prodaju ovog uređaja od strane tijela po nalogu licenciranog stomatologa ili lijekara. Adin zubni implantati nisu predviđeni za sigurnost i kompatibilnost s MR okrepljivačem. Adin zubni implantati nisu testirani na grijanie ili migraciju u MR okruženju. Maksimalni moment umetanja je 50 Ncm.

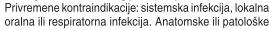
Implantate, pokrovne vijke, privremene upomice i uporista ne koristite ponovo. Ponovno upotreba ovih proizvoda dovest će do povećanog rizika od neuspjeha proizvoda jer funkcionalnost ne može biti zajamčena ako se li provodi ponovno upotrebu. Osim toga, postoji povećan rizik od kontaminacije.

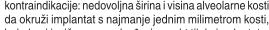
**OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA**

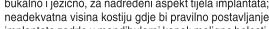
 **STERILE R**  
Sterilizirano zračenjem  
Jednostrošni sterilni sustav  
banje sa zaštitnim pakovanjem

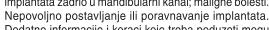
 **LOT** Broj serije

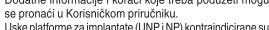
 **REF** Kataloški broj

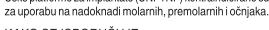
 Ne koristite ako je pakiranje oštećeno  
i pogledajte upute za uporabu

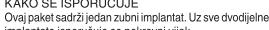
 **2** Ne ponovo sterilizirati

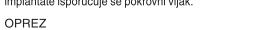
 **EC REP** Ovalni predstavnik u Evropskoj zajednici  
Evropska unija

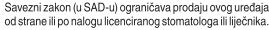
 **Čuvati na suhom**

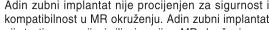
 **UK CA** Procijenjena usklađenosć u Velikoj Britaniji

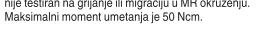
 **R** OPREZ: Američki cijevni salvi oznakljuju proizvod  
ovog uređaja ili strane liječnika ili stomatologa ili po  
njihovom nalogu.

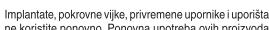
 **CE** Oznaka CE

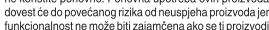
 Proizvođač

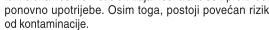
 Upotrijebiti do datum

 Podjednake upute za uporabu i pogledajte električne upute za uporabu

 Datum proizvodnje

 **MD** Medicinski uređaj

 **EC REP** Jedinstven identifikator uređaja

 Čuvati odjeve i sunčeve svjetlosti

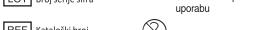
 Ezsofotografija

 Na dionapretjeri stegnovo

 CE Štampanje CE

 UK CA Ažiljivo/objektive

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

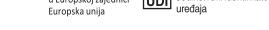
 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

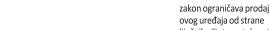
 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija


 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi

 RX

 Haptotaksija

 Na dionapretjeri makrofagi